

新感覚！ マシュマロのようなゲル

メディアン
medi-an®



今までにない やわらかさ！！
敏感な箇所や患部に やさしくフィット！！



発熱時に、産前産後の胸に、炎症を起こした患部に、スポーツの後に **冷却専用**

ぷるCURE アイスパック

一般医療機器（クラスI）



安心・安全に
こだわった材料を
使用しています。

特殊なふわぷるゲルで、やわらかく、やさしく、冷たく、
患部を癒すように、ふんわりと包み込みます。

類別：器12理学診療用器具

一般医療機器 一般名称：冷却パック（コード：3724020）

販売名：ぷるCUREアイスパック

届出番号：24B3X00004000010

品番：PCI-001

サイズ：約100mm×約220mm（内寸）

JAN：4978797400203

重量：約400g

定価：3,300円（税別）



製造販売元

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町262-1

TEL 0598-51-2361 FAX 0598-51-1143

従来よりも、やさしく、やわらかく、フィット感を追求した安心安全な冷却剤です。

■「やさしさ」・「やわらかさ」・「フィット感」・「安心・安全」へのこだわり。

Q 万が一、パックが破れて中身のジェルが漏れ出て来ても安全なの？

A 外部機関で、眼刺激性試験、皮膚刺激性試験、経口毒性試験で安全性が確認できています。

Q 外側の袋は直接肌に付けても安全なの？

A 「クリスタルゲル®」を使用しており、外部機関で、皮膚刺激性試験、急性毒性試験や、各種生体適合性試験で安全性が確認できています。

Q 外側の袋は、なぜやわらかいの？なぜ痛くないの？

A 「クリスタルゲル®」を使用しており、やわらかく、やさしくフィットするようにできています。



今までにない新感覚！


抜群のフィット感！



とてもやわらかい！

※イメージ画像

ぷるCUREアイスパックの温度データ

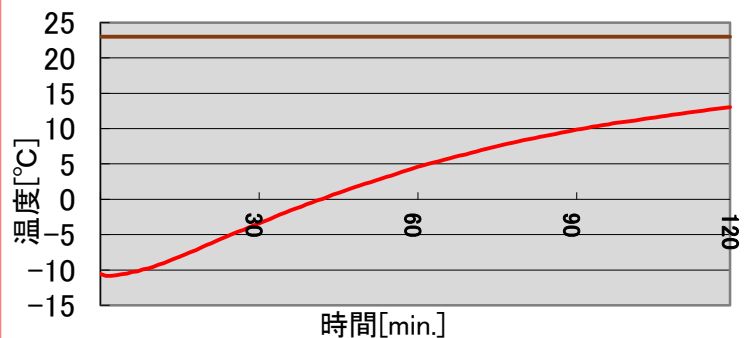

試験条件:業務用冷凍庫(-20℃設定)にて冷却した製品を約23℃環境下に静置した時の温度変化を測定した。

★ CRYSTAL GEL

クリスタルゲル®

※三重県・岐阜県の医療分野における広域連携の中で岐阜県の株式会社タナック社のクリスタルゲル®を使用しています。



ご使用にあたっての注意

1. 安全にご使用いただくために以下にご注意ください。

- 凍傷を防ぐため、冷凍庫から取り出した直後の本品を直接肌に当てないでください。
- 冷たすぎる場合は、タオルやガーゼに包んでご使用ください。
- 本品の袋の破損や、内容物が漏れ出している時はご使用をおやめください。
- 乳幼児や小さなお子様にご使用する際は看護師や保護者の管理のもと実施してください。
- 安全な内容物を使用していますが内容物を食べないでください。

2. 本品の破損、劣化を防ぐため、以下の行為をおやめください。

- 加熱してのご使用。(冷却専用です。家庭用冷凍庫や冷蔵庫で冷やしてください。)
- 落下、突刺し、衝撃などを加える。
- 引っ張ったり、握り締める。
- 背中、腰等の下に敷いて荷重をかける。
- 薬剤、油類への接触。

3. その他

- 家庭用冷凍庫で冷やしてください。
- 20℃以下で冷却しないでください。クリスタルゲルからヌメリが出ることがありますが人体への害はありません。中性洗剤で洗い、ご使用ください。
- 冷却時・保管時は付属のアルミ袋に入れてください。